


Checking Your Blood Glucose Using TRUeresult™

A guide for testing your blood glucose

Simple Steps to Test Your Blood Glucose

Meter, Test Strips & System Components

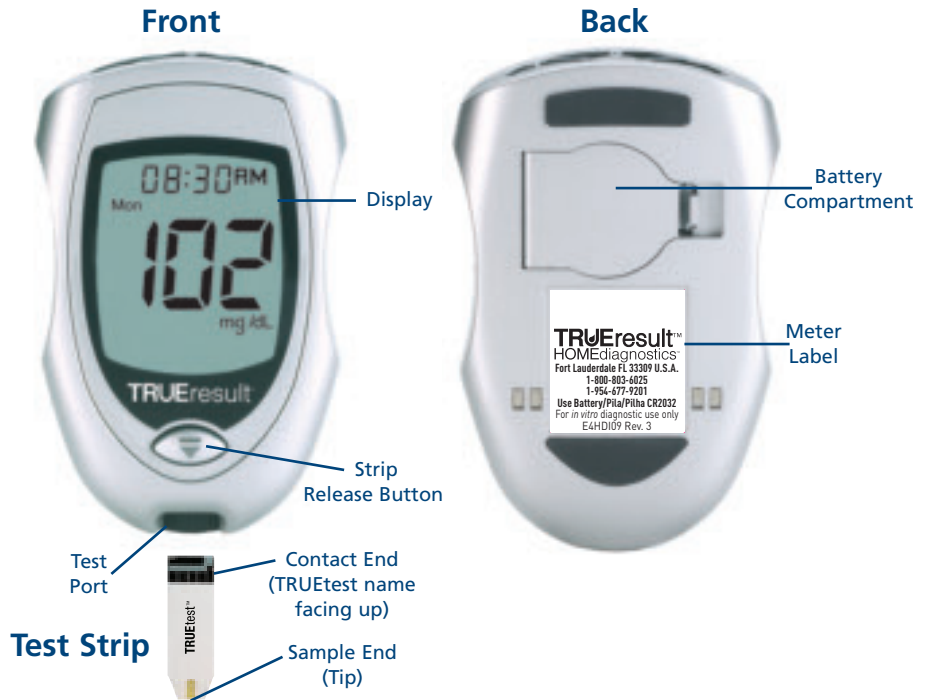

Blood Glucose Testing

- 

1 Wash your hands with warm, soapy water.
- 

2 Remove Test Strip from vial and close vial immediately. Insert Test Strip into Test Port with TRUeTest™ facing up. The Meter turns on.
- 

3 Lance your finger.
- 

4 Allow a blood drop to form, touch tip of strip to top of blood drop until Meter beeps.
- 

5 In as little as 4 seconds, glucose result will be displayed with date and time.
- 

6 Hold Meter in a vertical position with Test Strip facing down. Press Strip Release Button to discard the used Test Strip from the Meter.

This guide provides a brief overview on testing your blood glucose. If you need information about setting up your Meter with correct date and time, consult the "Getting Started" section of Owner's Booklet. For more detailed information on complete blood glucose testing procedure, consult "Testing Your Blood" section in the Owner's Booklet. For assistance using your blood glucose Meter, call our Technical Support Department at 1-800-803-6025.

Control de glucosa en la sangre con TRUEresult™

Guía para su prueba de glucosa en la sangre

Pasos simples para su prueba de glucosa en la sangre

Medidor, tiras de prueba y componentes del sistema



Pruebas de glucosa en la sangre



1

Lávese las manos con agua tibia y jabonosa.



2

Retire la tira de prueba del vial y ciérrelo de inmediato. Introduzca la tira de prueba en el puerto de prueba con el nombre TRUEtest™ mirando hacia arriba. El medidor se activa.



3

Aplique la lanceta en el dedo.



4

Deje que se forme una gota de sangre, con la punta de la tira toque la parte superior de la gota de sangre hasta que el medidor emita un pitido.



5

En tan sólo 4 segundos, se mostrará el resultado de la glucosa con la fecha y hora.



6

Sujete el medidor en posición vertical, con la tira de prueba mirando hacia abajo. Presione el botón de liberación para desechar la tira de prueba usada del medidor.

Esta guía proporciona una breve explicación general para realizar su prueba de glucosa en la sangre. Si necesita información sobre cómo configurar el medidor con la fecha y hora correctas, consulte la sección "Cómo empezar" de la libreta del propietario. Si necesita información más detallada sobre el procedimiento completo de las pruebas de glucosa en la sangre, consulte la sección "Pruebas de sangre". Para obtener ayuda con el uso del medidor de glucosa, llame a nuestro Departamento de soporte técnico al 1-800-803-6025.